



U-19-026



URGO Healthcare s.r.o., Bolevecká 493, 109 00 Praha 10
Tel.: +420 274 860 638, www.urgo.cz

URGO CZ  



Specialista na drobná poranění

KATALOG PRODUKTŮ URGO

URGO, partner lékáren





Filmogel

TECHNOLOGY



PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE VYVINUTÁ LABORATOŘEMI URGO

Filmogel je tekuté krytí, které vytváří na problematickém místě ochranný a diskretní film (prodyšný, ale odolný proti vnějším vlivům). Pod filmem se tvoří vhodné prostředí pro hojení poranění, dochází k výraznému zmírnění bolestivosti. Každý z Filmogelů je obohacený jinými aktivními látkami, vhodnými pro hojení dané problematiky.

URGO Filmogel® Afty gel, 6 ml

Indikace: Filmogel určený na ošetření aft a drobných poranění sliznice dutiny ústní.

Po nanesení vytváří tenký a poddajný film, který:

- ✓ Brání kontaktu s potravinami a slinami až po dobu 4 hodin
- ✓ Rychle ulevuje od bolesti
- ✓ Podporuje hojení



Zdravotnický prostředek
třída I

6+
let

Složení: Derivát celulózy, minerální kyselina, karboxylové kyseliny, alkohol, voda, aroma, sukralóza.

Použití: Přípravek naneste špachtličkou (součást uzávěru) na poranění tak, aby byla ošetřovaná oblast dobře překrytá. Nechte zaschnout asi 10 vteřin, potom ústa zavřete. V místě poranění se vytvoří film. Přípravek nanášejte dle potřeby až 4× denně, nejlépe před jídlem, až do úplného zhojení.

URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní sprej, 15 ml

Indikace: Na ošetření aft, zánětu dásní, ústních popálenin a poranění, které souvisí se stomatologickými úkony. Chrání, hydratuje a napomáhá obnově sliznice v případě aft či poranění úst. Tiší bolest a napomáhá hojení.

- ✓ Neštípe, nepálí
- ✓ Bez alkoholu



Zdravotnický prostředek
třída IIa

3+
let

Složení: Voda, glycerin, kyselina hyaluronová, PVP, PVM/MA kopolymer, dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové, acesulfam draselný, hydrogenovaný ricinový olej, PEG-40, benzoát sodný, aroma.

Použití: Namiřte trysku na ústní poranění a 2-3× stříkněte, aby se vytvořila tenká souměrná vrstva. Aplikujte minimálně 3× denně (po jídle a čištění zubů).

Název výrobku

URGO Filmogel® Afty

URGO URGO Afty a drobná poranění dutiny ústní

PDK

3405090

2917608

URGO Filmogel® Opary gel, 3 ml

Indikace: URGO Filmogel Opary se používá na ošetření oparů na rtech a jejich příznaků. Je určen k použití od výskytu prvních příznaků (brnění, svědění a pálení) až do úplného vymizení oparu.

Vytváří ošetřující, izolující a nenápadný film, který je účinný ve všech stádiích oparu:

- ✓ Zmírňuje brnění, svědění a pálení
- ✓ Omezuje růst oparu
- ✓ Omezuje tvorbu puchýřků a strupů
- ✓ Podporuje hojení
- ✓ Omezuje šíření infekce



Složení: Derivát celulózy, minerální kyselina, karboxylové kyseliny, rostlinný olej, alkohol, voda.

Použití: Pomocí jednorázového aplikátoru naneste tenkou vrstvu přípravku na opar. Nechejte zaschnout 1-2 minuty. Vytvoří se průhledný film. Jakmile opar již není pokryt filmem, aplikaci znovu opakujte, nejvýše však 2× až 4× denně, až do úplného zhojení.

URGO Filmogel® Spots na pupínky gel, 2 ml

Indikace: Tekuté krytí na ošetření akné a pupínků.

- ✓ Filmogel vytváří diskrétní film, který izoluje pupínek od vnějších vlivů, čistí, působí proti bakterií P. acnes a urychluje mizení pupínků. S kyselinou salicylovou a tea tree olejem.
- ✓ Přesná a hygienická aplikace díky peru se silikonovým hrotem, který je omyvatelný.
- ✓ Filmogel je vhodný i pod make-up.



Složení: Denaturovaný alkohol, voda, hydroxypropylcelulóza, glycerin, kyselina salicylová, olej z listů kajeputu střídavolistého - Melaleuca alternifolia (tea tree olej), limonen.

Použití: Otočte pohyblivým koncem pera, tím doje k uvolnění Filmogelu, který následně naneste na pupínek, tak abyste jej celý pokryli. Nechte několik minut zaschnout. Přípravek můžete používat až 14 dní. Nepřekračujte 6 aplikací denně.

Název výrobku

URGO Filmogel® Opary

URGO Filmogel® Spots Na pupínky

PDK

3406171

3125490

URGO Filmogel® Po bodnutí hmyzem gel, 3,25 ml

Indikace: Po bodnutí hmyzem jako jsou komáři, vosy, včely, ovádi, pavouci, larvy sametek a mravenci.

Řešení od URGO, které spojuje ochranné filmotvorné a zklidňující vlastnosti. Diskrétní a pohodlné řešení: Filmogel® vytváří transparentní a flexibilní film.

- ✓ Zklidňuje, chrání a zabraňuje škrábání
- ✓ Vytváří ochrannou bariéru proti vnějším vlivům (bakterie)
- ✓ Je voděodolný

Složení: Ethylacetát, alkohol, nitrocelulóza, isopropylalkohol, olej ze semen skočce obecného (*Ricinus communis*), hydroxypropylcelulóza, olej z pšeničných klíčků (*Triticum vulgare*), kyselina glycyretinová.

Použití: Naneste přípravek pomocí špachtlicky (součást uzávěru), tak, aby film rovnoměrně pokrýval celou oblast štípance. Aplikaci opakujte dle potřeby (obvykle 2-3× denně).



URGO Filmogel® Stop okusování nehtů průhledný lak, 9 ml

Indikace: Průhledný lak hořké chuti, který zabraňuje okusování nehtů a cucání prstů, zabezpečuje péči a ochranu nehtové kůžičky.

Složení: Alkohol, ethylacetát, ethylcelulóza, olej ze semen skočce obecného (*Ricinus communis*), hydroxypropylchitosan, denatonium-benzoát, tokoferyl-acetát.

Použití: Hořký lak se používá jako klasický lak. Aplikuje se 1x denně na čisté a suché nehty.



URGO Náplast ve spreji sprej, 40 ml

Indikace: URGO náplast ve spreji je určena na povrchová poranění, škrábance a odřeniny.

- ✓ Po nanesení vytváří průhledný film, který: chrání ránu jako druhá kůže, podporuje proces hojení.
- ✓ Vhodná obzvláště na místa ohybu jako jsou lokty nebo kolena.

Složení: Olej z pšeničných klíčků, nitrocelulóza, izopropanol, etylacetát, etanol, ricinový olej, dimethylether.

Použití: Ránu očistěte a osušte. Sprej nastříkejte na ránu ze vzdálenosti 5 - 10 cm a nechte 1 minutu zaschnout. Aplikaci opakujte dle potřeby.



Název výrobku

PDK

URGO Filmogel® Po bodnutí hmyzem

3802791

URGO Filmogel® Stop okusování nehtů

2793181

URGO Náplast ve spreji

3546895068192

URGO Filmogel® Praskliny gel, 3,25 ml

Indikace: Tekuté krytí na ošetření trhlin, prasklin a popraskané kůže na rukou a patách. Po aplikaci vytváří nenápadný a pružný film, který vytváří vhodné prostředí pro hojení.

- ✓ Chrání před vnějšími vlivy
- ✓ Zabraňuje znovuotevření rány
- ✓ Zmírňuje bolest
- ✓ Podporuje hojení
- ✓ Je voděodolný



Složení: Pšenice setá (*Triticum vulgare*), nitrocelulóza, isopropylalkohol, etylacetát, alkohol, hydroxypropylcelulóza, skočec obecný (*Ricinus communis*).

Použití: Naneste a rozetřete Filmogel pomocí špachtličky (součást uzávěru) tak, aby byla rána rovnoměrně pokrytá. Nechte několik vteřin zaschnout. Aplikujte opakovaně, 2-3× denně až do úplného zhojení rány.

URGO Filmogel® Poškozené nehty lak, 3,3 ml

Indikace: Filmogel určený k ošetření nehtů poškozených mykózou nebo poraněním.

Chrání před mikrobiologickými, fyzikálními a chemickými vlivy. Obsahuje hydroxypropylchitosan, což je polymer přírodní původu, který se aktivně váže na strukturu nehtu a má posilující účinek.

Prostupuje do struktury nehtu, kde:

- ✓ Čistí, regeneruje a chrání nehet
- ✓ Stabilizuje strukturu nehtu
- ✓ Podporuje růst zdravých regenerovaných nehtů



Složení: Hydroxypropylchitosan, purifikovaná voda, etanol, konzervační látka: pirocton olamin (Octopirox) 0,5 %.

Použití: Přípravek se nanáší 1× denně na čisté a suché nehty. Použití je velmi snadné, štěteček umožňuje optimální aplikaci na povrch nehtu, na kůžičku v okolí a pod okraj nehtu.

Název výrobku

URGO Filmogel® Praskliny

URGO Filmogel® Poškozené nehty

PDK

3406163

3406189

KATEGORIE HIGH TECH NOHY & RUCE



URGO Prevence mykóz 3v1 sprej, 150 ml

Indikace: Biocidní přípravek na nohy a obuv, který zajišťuje kompletní preventivní ochranu před plísňovými onemocněními nehtů a mezíprstí.

Sprej URGO Prevence mykóz 3v1 je biocidní přípravek, který kombinuje 3 účinky v 1

- ✓ **Antimykotikum**
Působí proti množení houbových mikroorganismů, odstraní 99,99 % původců mykóz.
- ✓ **Antiperspirant**
Snižuje potivost nohou, vhodný i jako prevence.
- ✓ **Deodorant**
Svěží mátová vůně účinně zamezuje zápachu nohou a obuvi.



Složení: Účinná látka – benzalkonium chlorid.

Použití: Aplikuje se jednou denně přímo na chodidla nohou a mezi prsty u nohou. Vhodné i k aplikaci přímo do obuvi.

URGO Prevence mykóz 3v1 je biocid. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Název výrobku

URGO Prevence mykóz 3 v 1 sprej 150ml

PDK

2808518

URGO Bradavice kryoterapie aerosol, 38 ml

Indikace: Inovativní kryoterapeutický přípravek pro domácí ošetření běžných a plantárních bradavic na ruku a nohou.

1. VOLBA PŘI OŠETŘENÍ BRADAVIC



- ✓ Metoda zmrazení bradavice – profesionální technologie k dispozici pro domácí použití.
- ✓ Přesný a praktický aplikátor obklopí bradavici a uvolní potřebnou dávku kryogenní tekutiny pro ošetření 3 různých velikostí bradavic. Zabraňuje riziku popálení zdravé pokožky.
- ✓ K odstranění bradavice dojde v průběhu 10-14 dní.
- ✓ Praktická aplikace – před použitím není třeba výrobek sestavovat, ihned připraven k použití.



Zdravotnický prostředek
třída IIa

4+
let

Složení: dimethyleter 38 ml

Použití: Hrot aplikátoru umístěte přímo na bradavici. Následně stiskněte dávkovač 3- 5×, dle množství určeného k ošetření dané velikosti bradavice.

Velikost bradavice	MALÁ: 3 mm a menší	STŘEDNÍ: 3-5 mm	VELKÁ: 6 mm a větší
Počet dávek/stisků	3 dávky	4 dávky	5 dávek

URGO Pero na odolné bradavice gel, 2 ml

Indikace: Gel s obsahem TCA na ošetření odolných běžných a plantárních bradavic na ruku a nohou.

2. VOLBA V PŘÍPADĚ, ŽE BRADAVICE NEMIZÍ



- ✓ Přípravek působí na principu exfoliace, která způsobí olupování pokožky, díky čemuž dochází k odstranění viru.
- ✓ Transparentní hrot pera a modře zbarvený gel umožňují přesnou aplikaci.
- ✓ Výsledky viditelné již od 1. týdne



Zdravotnický prostředek
třída IIa

4+
let

Složení: účinná látka – 40% TCA (kyselina trichloroctová)

Použití: Pero otevřete otočením uzávěru tak, aby byly obě červené šipky naproti sobě, následně uzávěr sejměte. Po úvodním naplnění pera stačí na bradavici aplikovat 1 kapku gelu. Po aplikaci nechte gel na bradavici zaschnout po dobu 10-15 minut. Aplikujte 1 kapku gelu, u dospělých 2x denně, u dětí pouze 1x denně. Používejte po dobu 4 dní.

Název výrobku	PDK
URGO Bradavice kryoterapie 38ml	2838093
URGO Pero na odolné bradavice 2ml	3769792

HYDROKOLLOIDNÍ NÁPLASTI


HYDROKOLLOIDNÍ TECHNOLOGIE

Hydrokoloidní hmota v kontaktu s exsudátem z rány vytváří bílý vlhký gel, který:

- ✓ Ulevuje od bolesti
- ✓ Podporuje hojení
- ✓ Nelepí se na ránu

Hydrokoloidní náplast jako druhá kůže

- ✓ Snižuje tlak a tření
- ✓ Ulevuje od bolesti
- ✓ Podporuje hojení

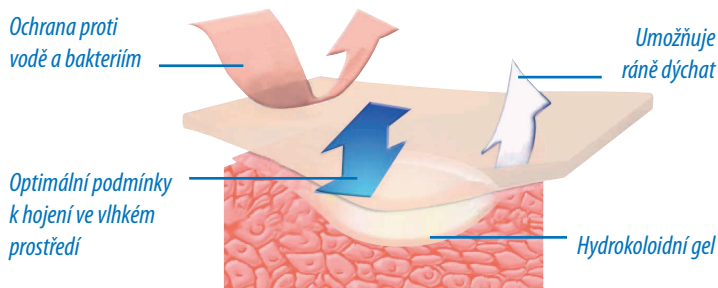

Dochází k vytvoření optimálních podmínek pro hojení rány - optimální teplota, vlhkost, pH.

Polyuretanový podklad z polopropustného materiálu je voděodolný, ale zároveň umožňuje ráně „dýchat“. Chrání ránu před bakteriemi a vnějšími vlivy.

Hydrokoloidní náplasti jsou vhodné k ošetření puchýřů a povrchových poranění – škrábance, odřeniny, řezné rány apod.

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ

Řada náplastí na puchýře v moderním balení.

Praktická plastová krabička s uzavíratelným víčkem – ideální do kabelky, posilovny i na cesty.

URGO Hojení puchýřů na paty hydrokoloidní náplasti 5 ks

Indikace: Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů.

5

43 x 72 mm



Ergonomicky upravený tvar náplasti se jako druhá kůže přizpůsobí a zaručí vysokou přilnavost. Speciálně navrženo pro sportovní aktivity – po aplikaci zajistí perfektní komfort pro maximální výkon.

Zesílená středová část náplasti poskytuje zvýšenou ochranu proti tření.

- ✓ Poskytují úlevu od bolesti
- ✓ Podporují hojení puchýře
- ✓ Zabraňují tření



URGO Hojení puchýřů diskrétní hydrokoloidní náplasti 5 ks

Indikace: Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů.

5 34 x 59 mm

Průhledné, velmi diskrétní náplasti na ošetření puchýřů.

Speciálně navržené pro ženy – perfektní zejména do lodiček a otevřených bot.

- ✓ Poskytují úlevu od bolesti
- ✓ Podporují hojení puchýře
- ✓ Zabraňují tření



Použití: Sejměte průhledný ochranný film (strana označená šipkami). Náplast zahřejte mezi dlaněmi, aby byla ohebnější a sejměte ochrannou ozdobnou vrstvu. Umístěte náplast středovou částí na puchýř. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné ji sejmout. Poté nalepte novou náplast dle návodu k použití.

URGO Blisters na puchýře hydrokoloidní náplasti 6 ks

Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření puchýřů.

Ve 2 velikostech vhodných k ošetření různých lokalizací puchýřů. Ekonomické balení.

3 30 x 76 mm



3 45 x 72 mm



- ✓ Poskytují úlevu od bolesti
- ✓ Podporují hojení puchýře
- ✓ Používají se také jako prevence vzniku puchýřů



Použití: Otevřete sáček a vyjměte náplast. Zahřejte ji v rukou, aby byla tvárnější. Odstraňte nejprve jedno ochranné křídélko a umístěte náplast na puchýř, který musí být zcela překrytý hydrokoloidním polštářkem. Následně sejměte druhé ochranné křídélko. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné ji sejmout. Poté nalepte novou náplast dle návodu k použití.

Název výrobku

PDK

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ Na paty hydrok. nápl. 5ks

3546895033411

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ Diskrétní hydrok. náplast 5ks

3546895010269

URGO BLISTERS Na puchýře hydrokoloidní náplast 6ks

2936533

URGO FAST HEALING

Řada hydrokoloidních náplastí na rychlé hojení

URGO Fast Healing Finger - na prsty hydrokoloidní náplasti 8 ks

Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření řezných poranění, zejména v oblasti prstů, po zastavení krvácení.

8 20 x 72 mm



Speciální zahnutý tvar náplasti speciálně určený pro ošetření povrchových poranění v oblasti prstů.

- ✓ Ulevují od bolesti
- ✓ Podporují hojení
- ✓ Nelepí se k ráně



Zdravotnický prostředek
třída IIa

URGO Fast Healing Knee - na kolena hydrokoloidní náplasti 6 ks


Indikace: Náplasti s hydrokoloidním polštářkem na ošetření odřenin a škrábenců, po zastavení krvácení.

Speciální tvar náplasti určený k ošetření odřenin v oblasti kolenou, případně loktů.

4 68 x 68 mm
(velikost polštářku)



2 77 x 62 mm
(velikost polštářku)

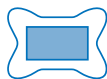

- ✓ Poskytují úlevu od bolesti
- ✓ Podporují hojení
- ✓ Nelepí se k ráně



Zdravotnický prostředek
třída IIa

Použití: Otevřete sáček a vyjměte náplast. Zahřejte ji v rukou, aby byla tvárnější. Odstraňte nejprve jedno ochranné křídélko a umístěte náplast na ránu, která musí být zcela překrytá hydrokoloidním polštářkem. Následně sejměte druhé ochranné křídélko. Náplast nemá být ponechána na místě déle než 2-3 dny. Pokud se sama neodlepí, je nutné ji sejmout. Poté nalepte novou náplast dle návodu k použití.

URGO Na odřeniny hydrokoloidní náplasti 5 ks

Indikace: Hydrokoloidní náplasti určené k ošetření odřenin, oděrek a škrábanců; po zastavení krvácení.

5 40 x 72 mm

- ✓ Poskytují úlevu od bolesti
- ✓ Podporují hojení
- ✓ Nelepí se k ráně
- ✓ Hydrokoloidní vrstva po celé ploše náplasti



Použití: Přiložte náplast na poranění a následně ji přitiskněte a zahřejte dlaní. Náplast poprvé vyměňte 24 hodin po první aplikaci, a poté vždy po 48 hodinách nebo pokud se náplast sama odlepí.

Prodej produktu bude ukončen – pouze do doprodání současných zásob.



Název výrobku

URGO FAST HEALING FINGER na prsty hydrok.nápl.8ks

URGO FAST HEALING-KNEE Na kolena hydrok.nápl.6ks

URGO NA ODŘENINY hydrokol. nápl. 7,2x4 cm 5ks

PDK

3616936

3691301

3546895089470

LIPIDOKOLOIDNÍ NÁPLASTI

URGO, VÁŠ EXPERT NA OŠETŘENÍ POPÁLENIN A POVRCHOVÝCH RAN

JAK OŠETŘIT POPÁLENINU?*

Určeno k ošetření popálenin **1. STUPNĚ** a povrchových popálenin **2. STUPNĚ**


1. Ránu oplachujte pod tekoucí vodou (15-25 °C) alespoň 20 minut nebo dokud bolest nezmizí
2. Osušte a otřete ránu
3. Zakryjte poraněné místo sterilní gázou, která se nepřilepí k pokožce

PROFESIONÁLNÍ LIPIDOKOLOIDNÍ TECHNOLOGIE V NÁPLASTECH PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ


3. Měkká a elastická **PODKLADOVÁ VRSTVA**, která chrání ránu.

1. **TYLOVÁ SÍTKA** napuštěná hydrokoloidními částicemi a vazelínou. Ulevuje od bolesti a hojí.

2. **POLŠTÁŘEK**, který absorbuje exsudát z rány.

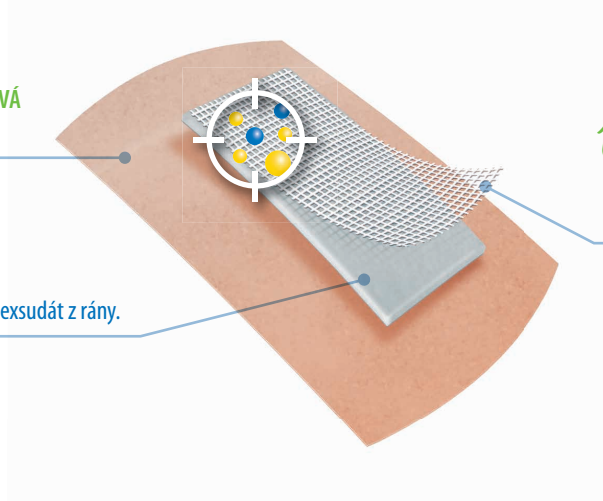


EPIDERMIZACE RÁNY

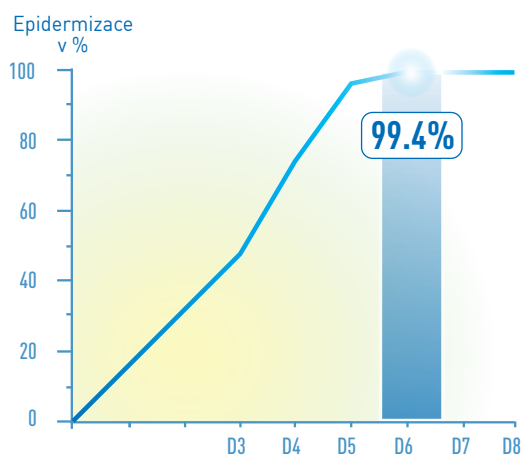

- Po 6 dnech používání URGO BURNS s technologií TLC je epidermizace rány na úrovni 99,4 %

HODNOCENÍ BOLESTIVOSTI

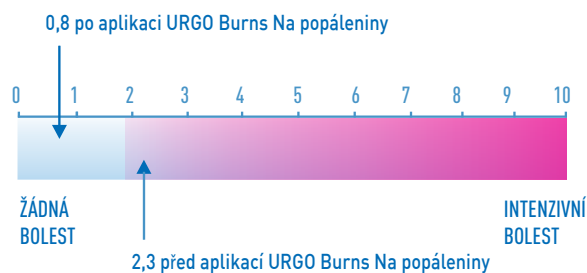

- Škála hodnocení 1-10
- Po aplikaci náplasti: 0,8
- Před aplikací náplasti: 2,3
- Snižuje bolestivost poranění

Sterilní náplasti a síťka na ošetření popálenin a povrchových ran

Indikace: Pro ošetření popálenin 1. stupně, povrchových popálenin 2. stupně a povrchových ran

PROFESIONÁLNÍ LIPIDOKOLOIDNÍ TECHNOLOGIE (TLC)

Klinicky ověřené okamžité zmírnění bolesti a podpora hojení*

- ✓ **Zmírňuje bolest** ihned po aplikaci*
- ✓ **Urychluje hojení rány** díky kombinaci hydrokoloidních částic a vazelíny
- ✓ Náplast i síťka jsou **bezbolestně snímatelné** a nelepí se k ráně

Velmi tenká vlákna, která jsou součástí TLC technologie, jsou od sebe vzdálená 0,5 mm

- síťka se netřepí, žádné vlákno se nedostane do rány
- nedochází k mokvání pokožky v okolí rány
- nedochází k poničení nově vytvořené tkáně při odstraňování

Podpora hojení: vytváří vhodné prostředí pro hojení rány

Po aplikaci dochází ke zmírnění bolestivosti

- 92% pokles bolestivosti*
- úplné vymizení bolesti u 53 % testovaných osob*

Použití náplasti:

1. Očistěte ránu antiseptickým přípravkem bez alkoholu.
2. Důkladně osušte sterilním obvazem.
3. Aplikujte sterilní náplast na postižené místo, tak aby byla celá rána zakrytá. Nepoužívejte, pokud je poranění větší než samotná sterilní náplast.

Použití sítky:

1. Očistěte ránu antiseptickým přípravkem bez alkoholu.
2. Důkladně osušte sterilním obvazem.
3. Je-li třeba, dezinfikovanými nůžkami ustříhnete požadovaný tvar sítky.
4. Sterilní síťku aplikujte na poraněné místo.
5. Poté aplikujte druhou vrstvu, sterilní obvaz, který zafixujete pružnou páskou.

6 50 x 50 mm
(síťka)



6 50 x 70 mm
(náplast)



4 100 x 70 mm
(náplast)



Zdravotnický prostředek
třída IIa



Zdravotnický prostředek
třída IIa

Název výrobku

PDK

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. nápl. 5x7cm 6ks

2936541

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. nápl. 10x7cm 4ks

2931799

URGO BURNS Na popáleniny lipidok. síťka 5x5cm 6ks

2936525

TRADIČNÍ NÁPLASTI

ŘADA TRADIČNÍCH, KLASICKÝCH NÁPLASTÍ NA OCHRANU POVRCHOVÝCH RAN.
Pro pokrytí potřeb 100 % spotřebitelů.

Indikace: ochrana povrchových ran

Kompletní řada náplastí URGO:
různé podklady pro různé potřeby

PODKLADOVÁ VRSTVA pro každou situaci a typ pokožky

Prodyšný podklad – pokožka dýchá

Různé formáty – jednotlivě balené i náplasti ke stříhání

PRAKTICKÉ BALENÍ

Náplasti se jednoduše otevírají

POLŠTÁŘEK NÁPLASTI

Nelepí se k ráně (polštářek je překrytý sítkou)

Absorbuje exsudát z rány

Obsahuje antiseptikum (benzalkonium chlorid 960 mg/m²)

NÁPLASTI S OBSAHEM ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU

Indikace: Díky obsahu antiseptika v polštářku (benzalkonium chlorid 960 mg/m²) působí náplasti zároveň jako antimikrobiální ochrana povrchových ran.

Náplasti s antiseptikem v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy III.

URGO Resistant – odolná náplast

Odolná ve všech situacích

- ✓ Textilní elastický podklad tělové barvy
- ✓ Silná přilnavost
- ✓ Prodyšný podklad

Kusové náplasti: **20 ks**

6



20 x 40 mm

10



20 x 72 mm

4



34 x 72 mm

Nedělená náplast



1 m x 8 cm

Nedělená náplast



1 m x 6 cm



URGO Sensitive-Stretch – náplast na citlivou pokožku

Respektuje citlivou pokožku

- ✓ Netkaný pružný podklad tělové barvy
- ✓ Ideální na místa ohybu (klouby, prsty)
- ✓ Vysoká tolerance lepicí vrstvy k pokožce
- ✓ Prodyšný podklad

Kusové náplasti: **20 ks**

6



20 x 40 mm

10



20 x 72 mm

4



34 x 72 mm

Nedělená náplast



1 m x 6 cm



- Rodinné balení 60 ks mix: 6 ks 34 x 72 mm, 34 ks 20 x 72 mm, 20 ks 20 x 40 mm
- Velký box (URGO Multiextensible) 300 ks: 20 x 72 mm

URGO Waterproof – voděodolná náplast

Odolává vodě

- ✓ Pro vzduch propustný polyurethanový podklad
- ✓ Voděodolný – odolává vodě i bakteriím
- ✓ Do koupele, bazénu a při koupání v moři
- ✓ Průhledná náplast

Kusové náplasti: **10 ks**



20 x 72 mm 34 x 72 mm

Kusové náplasti: **5 ks**



10 x 6 cm



URGO Ultra Protection – náplast pro maximální ochranu

Chrání ránu před nárazy

- ✓ Pěnový prodyšný podklad tělové barvy
- ✓ Pohodlná, zesílená náplast

Kusové náplasti: **10 ks**



20 x 72 mm



URGO Aqua Protect – omyvatelná náplast

Chrání při krátkodobém kontaktu s vodou

- ✓ Polyethylenový podklad tělové barvy
- ✓ Ke krátkodobému kontaktu s vodou (např. mytí rukou)
- ✓ Prodyšný podklad

Kusové náplasti: **20 ks**



20 x 40 mm 20 x 72 mm 34 x 72 mm

Nedělená náplast **10 ks**

✂ 10 cm x 6 cm



NÁPLASTI BEZ OBSAHU ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU

Náplasti bez antiseptika v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy I.

URGO FINGER – náplasti na prsty

- ✓ Přizpůsobené poraněním na prstech a jejich okolí
- ✓ Extra dlouhý formát na obmotání kolem prstu
- ✓ Mašličky na bříska prstů
- ✓ Pružné a vhodné i pro citlivou pokožku

Kusové náplasti: **10 ks**



20 x 120 mm



43 x 73 mm



NÁPLASTI BEZ OBSAHU ANTISEPTIKA V POLŠTÁŘKU

Náplasti bez antiseptika v polštářku jsou zdravotnické prostředky třídy I.

URGO Face – náplasti na obličej

- ✓ Diskrétně kryjí malé povrchové ranky na obličej
- ✓ Kopírují pohyby obličeje
- ✓ Prodyšná podkladová vrstva

Kusové náplasti: **10 ks**



URGO Special Kids Jungle – dětské náplasti

- ✓ Dětské náplasti s veselými motivy z džungle
- ✓ Hypoalergenní
- ✓ Odolné vůči vodě
- ✓ Nelepí se na ránu

Kusové náplasti: **14 ks**




Název výrobku	PDK
URGO RESISTANT Odolná náplast 1 m x 6 cm	2664812
URGO RESISTANT Odolná náplast 20 ks	2664804
URGO RESISTANT Odolná náplast 1 m x 8 cm	3733855
URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast 1 m x 6 cm	2664762
URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast 20 ks	2664754
URGO SENSITIVE Citlivá pokožka náplast family pack, 60 ks	3004984
URGO MULTI-EXTENSIBLE rychloobvaz, 20x72mm 300ks	0458951
URGO WATERPROOF Voděodolná náplast Aquafilm 10ks	2664770
URGO WATERPROOF Voděodolná náplast Aqf 10x6cm 5ks	2664788
URGO ULTRA PROTECTION Maximální ochrana náplast 10ks	2664820
URGO AQUA PROTECT Omyvatelná náplast 10cmx6cm 10ks	2664564
URGO AQUA PROTECT Omyvatelná náplast 20ks	2664531
URGO FINGER Náplasti na prsty 10 ks	3562619
URGO Face náplasti na obličej 10ks	3743839
URGO Special Kids JUNGLE Dětská náplast 14ks	3622926

URGO Coricide – Náplast na kuří oka

Indikace: Ošetření tvrdých, měkkých kuřích ok a mozolů.

Náplasti s obsahem kyseliny salicylové (32 mg) k lokálnímu ošetření kuřích ok a mozolů.

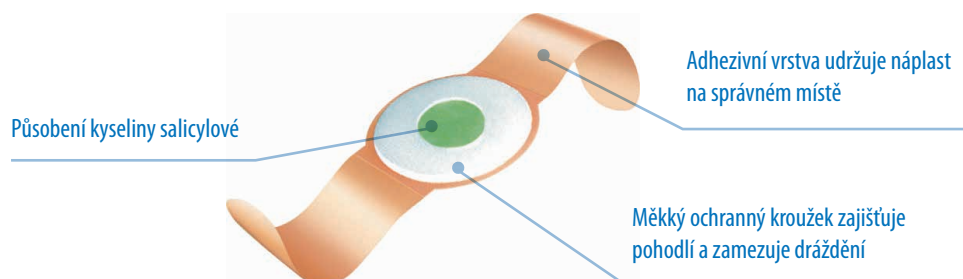

Kusové náplasti: **12 ks**



Složení: aktivní látka – kyselina salicylová 32 mg

Použití: Náplast aplikujte denně, po teplé koupeli nohou. Vyhněte se aplikaci na zdravou pokožku. Aplikujte ideálně před spaním.

Název výrobku

URGO CORICIDE Náplast na kuří oka 12ks

PDK

2931781

URGO S.O.S Cuts – Samodržící obinadlo na zastavení krvácení

Indikace: Rychlé ošetření krvácejících povrchových řezných ran a dalších drobných poranění.

- ✓ Rychlá zástava krvácení pomocí komprese
- ✓ Snadné odtržení bez nutnosti použít nůžky
- ✓ Samodržící
- ✓ Vždy po ruce

- Použití:**
1. Odrolujte požadovanou délku obinadla.
 2. Pro zastavení krvácení narolujte 2-3 otáčky obinadla tak, aby jemně pokrývalo postižené místo.
 3. Uchopte konec obinadla a natahujte až do přetrhnutí.
 4. Obinadlo odstraňte, jakmile se krvácení zastaví nebo maximálně po 30 minutách od aplikace.
 5. Následně ránu vyčistěte, vydezinfikujte, opláchněte a osušte.
 6. Jestliže je to nutné, aplikujte vhodnou náplast.



Název výrobku

URGO SOS CUTS Samolepící obinadlo 3 m x 2,5 cm

PDK

3324754

FIXAČNÍ NÁPLASTI

Indikace: Vhodné k fixaci medicínského materiálu, k fixaci různých druhů krytí a ran, a také k fixaci obinadel. V praktickém plastovém balení.

URGO FILM – transparentní náplast

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

Průhledná náplast z omyvatelného transparentního materiálu.

- ✓ Mikroperforovaná – umožňuje pokožce dýchat
- ✓ Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku



lze odtrhnout bez použití nůžek

URGO SYVAL – bílá textilní náplast

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

5m x 5cm – Prodej výrobku bude ukončen (pouze do vyprodání zásob).

Bílá textilní náplast s velmi silnou adhezivní vrstvou.

- ✓ Odolná v každé situaci
- ✓ Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
- ✓ Prodyšná



lze odtrhnout bez použití nůžek

URGO PORE – náplast z netkaného textilu

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

5m x 5cm/5m x 2,5cm s trhátkem – Prodej výrobků bude ukončen (pouze do vyprodání zásob).

Bílá náplast z netkaného textilu

- ✓ Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
- ✓ Prodyšná
- ✓ Přizpůsobí se pohybu



lze odtrhnout bez použití nůžek

URGO FIX – textilní náplast tělová

5m x 1,25cm/5m x 2,5cm

Textilní náplast tělové barvy

- ✓ Hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pokožku
- ✓ Prodyšná
- ✓ Velmi odolná se silnou adhezivitou



lze odtrhnout bez použití nůžek

Zdravotnické prostředky / třída I

URGO Urgostrips – sterilní adhezivní chirurgické stehy

Indikace: K rychlému a sterilnímu uzavření povrchových ran a chirurgických řezů po malých zákrocích (do 2,5 cm).


- ✓ Estetické hojení rány
- ✓ Odolnost proti prasknutí
- ✓ Vysoká přilnavost
- ✓ Hypoalergenní – výborná kožní snášenlivost



Zdravotnický prostředek
třída IIa

1 sáček obsahující 10 ks stehů
100 mm x 6 mm

- Použití:**
1. Nalepte paralelně 2 stehy podél každé strany rány.
 2. Třetí steh nalepte na jeden okraj rány a mírným tahem jej přeneste a nalepte napříč rány tak, aby došlo k přitažení okrajů rány k sobě, aniž by došlo k jejich překrytí. Stejným způsobem nalepte další stehy, dokud není rána zcela uzavřena.
 3. Nakonec naneste další 2 stehy křížem k upevnění stehů. Stehy ponechte na místě 3 až 4 dny, dokud neodpadnou nebo přestanou být funkční. Vyměňte stejným postupem, dokud se rána zcela nezhojí.

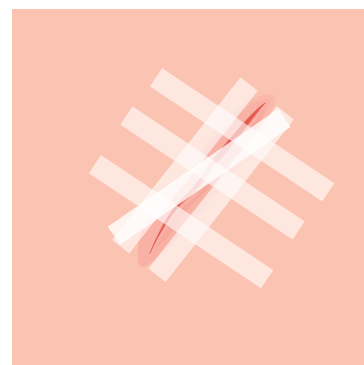

Název výrobku	PDK
URGO FILM Transparentní náplast 5mx1.25cm	8594029691490
URGO FILM Transparentní náplast 5mx2.5cm	8594029690868
URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx1.25cm	8594029691483
URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx2.5cm	8594029690851
URGO SYVAL Textilní náplast bílá 5mx5cm	4094927
URGO PORE Náplast netkaný textil 5mx1.25cm	4157484
URGO PORE Náplast netkaný textil 5m x 2.5cm	8594029690875
URGO PORE Náplast netkaný textil 5mx5cm	4094893
URGO PORE Nápl. net. textil 5m x 2.5 cm s trhátkem	4302262
URGO FIX Náplast textilní 5mx1.25 cm	2995240
URGO FIX Náplast textilní 5mx2.5 cm	2995232
URGO STRIPS Fixační nápl. stehy 100x6mm 10ks	4276052

POOPERAČNÍ KRYTÍ

URGO Optiskin pooperační náplast

Indikace: Krytí určené k ochraně chirurgických a povrchových ran (šité rány, místa vpichu, řezné rány a apod.), dále také k zakrytí zdravotnických pomůcek (sondy, dreny).

- ✓ Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
- ✓ Voděodolné – podklad náplasti z průhledného polyuretanu
- ✓ Polopropustné – ráda může dýchat
- ✓ Vysoká tolerance pokožky k lepicí vrstvě
- ✓ Polštářek náplasti je pokryt mikrofilmem – nelepí se k ráně



10 5,3 cm x 8 cm (velikost polštářku 3,5 x 2,87 cm)



10 10 x 7 cm (velikost polštářku 7x 3,5 cm)



5 15 x 9 cm (velikost polštářku 11,3 x 4,6 cm)

URGO Urgosterile sterilní náplasti

Indikace: Krytí určené k ochraně chirurgických a povrchových ran (šité rány, místa vpichu, řezné rány a apod.), dále také k zakrytí zdravotnických pomůcek (sondy, dreny).

- ✓ Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
- ✓ Náplasti z bílé netkané textilie (polyester)
- ✓ Elastické - přizpůsobí se kloubům a pohybům pokožky
- ✓ Vysoká tolerance pokožky k lepicí vrstvě
- ✓ Polštářek náplasti je pokryt mikrofilmem – nelepí se k ráně



10 5,3 cm x 8 cm (velikost polštářku 3,5 x 2,87 cm)



10 10 x 7 cm (velikost polštářku 7x 3,5 cm)

URGO Sterilní komprese

Indikace: Krytí povrchových ran, čištění ran.

- ✓ Hydrofilní 100% bavlněný gázový kompres
- ✓ 17 vláken, 8 vrstev
- ✓ Vysoce absorbční
- ✓ Hypoalergenní
- ✓ Sterilní – sterilizováno etylen oxidem
- ✓ Balené v sáčkích – každý sáček obsahuje 2 ks

Složení	100% bavlna (17 vláken)	
Kapacita absorpce	≥ 10 g/g	
Váha	≥ 23 g/m ²	
Velikost složené +7% nesložené	10 x 10 cm 20 x 40 cm	7,5 x 7,5 cm 15 x 30 cm
Počet vrstev složené	8	8



10 7,5 x 7,5 cm 10 sáčků

10 10 x 10 cm 10 sáčků



Název výrobku	PDK
URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp.5.3x8cm 10ks	3551786
URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp.10x7cm 10ks	3551778
URGO OPTISKIN Pooperační nápl.transp. 15x9cm 5ks	3715944
URGO URGOSTERILE Sterilní náplast 5,3cmx8cm 10ks	3546895015035
URGO URGOSTERILE Sterilní náplast 10cmx7cm 10ks	3546895015042
URGO Steril.kompresse bavl.7.5x7.5cm 10sáčků á 2ks	3551802
URGO Steril.kompresse bavl.10x10cm 10sáčků á 2ks	3551794

URGO Corn Protectors – návleky na prsty

Indikace: Ochrana prstů na nohou – kuří oka, kladívkové prsty.

Diskrétní silikonové návleky na ochranu prstů na nohou.

- ✓ Chrání před otlaky a třením
- ✓ Snadno se nasazují, dokonale sedí v botě
- ✓ S obsahem hydratačního oleje pro zjemnění pokožky (například v případě kuřího oka)



Obsah balení: 4 ks ochranných návleků

URGO Bunion Protector – návlek na hallux valgus

Indikace: Ochrana vbočeného palce.

Elastický ochranný návlek z měkkého a pružného materiálu, mírní bolest a vytváří ochrannou bariéru proti tlaku a tření v místě vbočení. Obsahuje polymerový gel k prevenci otlaků.

- ✓ Mírní bolest v místě vbočení
- ✓ Zmírňuje tlak a tření
- ✓ Výborně pasuje do obuvi
- ✓ Lze prát v pračce
- ✓ Univerzální velikost (37-43), vhodný na pravou i levou nohou



Obsah balení: 1 návlek na vbočený palec

Název výrobku

URGO CORN PROTECTOR Návleky na prsty 4ks

URGO BUNION PROTECTOR Návlek na Hallux Valgus 1ks

PDK

3302636

3302644

PODLAHOVÝ STOJAN VARIO

- ✓ Moderní design
- ✓ Vylepšená funkčnost
- ✓ Bočnice lze umístit dvěma způsoby - buď směřují do stran nebo dopředu.



200 cm výška, včetně top karty
180 cm výška, bez top karty

40 cm hloubka

65 cm šířka s bočnicemi
50 cm šířka bez bočnic

